

SMILY

Prenosný ultrazvukový čistič zubov



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Odteraz si môžete udržiavať zdravé zuby a ďasná. Účinne odstráňte zubný povlak, zubný kameň a škvrny, jednoducho sa zbavte tvrdého zubného kameňa zo zubov a zabráňte tak ochoreniu ďasien. Tento multifunkčný čistič zubov využíva pokročilé vibrácie na odstránenie zubného kameňa z vašich zubov a masíruje ďasná, čím vám dodá sebavedomý úsmev a svieži dych každé ráno!

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1x prenosný ultrazvukový čistič zubov
- 1x nabíjací kábel
- 1x návod na použitie



ŠPECIFIKÁCIA

Menovité napätie: 3.7V	Počet stupňov frekvencie: 5
Kapacita batérie: 300mAh	Vodotesné hodnotenie: IPX6
Doba nabíjania: približne 2 hodiny	Štýl: nabíjanie (zabudovaná batéria)
Adaptér: 5V / 5mA	Určené pre: dospelých
Pohotovostný prúd: 20uA	Materiál: lekárske silikón + plast
Menovitý prúd: 200mA	Prostredie vhodné na používanie: normálna teplota
Hluk motora: menej ako 60 decibelov	
Výdrž batérie: približne 2 hodiny	

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a UCHOVAJTE HO NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento čistič je určený na použitie na zuby. Je určený na odstránenie zubného kameňa alebo zubného povlaku na zuboch a iných povrchoch v chrupe, pri ktorých sú ultrazvukové vibrácie prospešné. Nepoužívajte ho na to, na čo nie je určený. Ak si nie ste istí spôsobom používania, obráťte sa, prosím, na vášho predajcu alebo miesto nákupu.
- Používajte iba na stanovené účely. Nedodržanie pokynov v návode na obsluhu môže mať za následok vážne zranenie používateľa alebo poškodenie produktu, ktoré môže byť neopraviteľné. Pred použitím tohto produktu sa uistite, že ste si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
- Pri čistení vždy priložte hrot na povrch zubov. Vyhnite sa zbytočnému kontaktu hrotu s mäkkými tkanivami, ako sú ďasná, sliznice alebo pokožka.
- Pred použitím skontrolujte abnormálne vibrácie hrotu. Ak sa zistia abnormality, okamžite prestaňte čistič používať a kontaktujte predajcu.
- Nedovoľte, aby sa hrot počas čistenia dotýkal keramickej zubnej náhrady. Mohlo by to poškodiť hrot.

- Čistič používajte iba s originálnym napájacím adaptérom.
- Pred pripojením adaptéra k zdroju sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Kovová hlava čističa zubov nie je vymeniteľná.
- Čistič zubov nevystavujte vonkajšiemu prostrediu, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Používajte ho pri teplote vnútorného prostredia od -10 °C do 40 °C.
- Výrobok dlho neumývajte ani nenamáčajte.
- Tento produkt je určený len pre dospelých. Po použití produkt správne uskladnite. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby omylom nedošlo k zraneniu.
- Tento výrobok obsahuje batériu. Neumiestňujte ho do ohňa alebo do vysokoteplotnej nádoby, aby ste predišli požiaru alebo výbuchu.
- Neumiestňujte výrobok do blízkosti ohrievačov, otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Udržujte čistič zubov v dostatočnej vzdialenosti od očí.
- Napájací adaptér neodpájajte od sieťovej zásuvky ťahaním za napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho adaptéra alebo sieťovej zásuvky. Napájací adaptér odpojte zo sieťovej zásuvky vytiahnutím zástrčky.
- Pred začiatkom čistenia vždy skontrolujte, či nie sú poškodené komponenty jednotky čističa. Poškodené komponenty sa nesmú používať a musia sa vymeniť.
- Kábel sieťového adaptéra nekladte na ostré predmety.
- Aby ste predišli vzniku nebezpečných situácií, neopravujte čistič zubov ani jeho príslušenstvo sami a ani ho nijako neupravujte. V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku riskujete, že stratíte svoje zákonné práva vyplývajúce z neuspokojivého výkonu alebo záruky kvality.
- Nepoužívajte prístroj so zlomeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak prístroj nefunguje správne, alebo ak spadol či je akokoľvek poškodený.
- Neobmotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Akákoľvek údržba alebo oprava musí byť vykonaná autorizovaným servisným zástupcom.
- Výrobok nie je vhodný na použitie v prítomnosti horľavých plynov.
- Tento spotrebič používajte iba na stanovený účel.

Pozor: nepoužívajte výrobok počas nabíjania.

KOMPONENTY

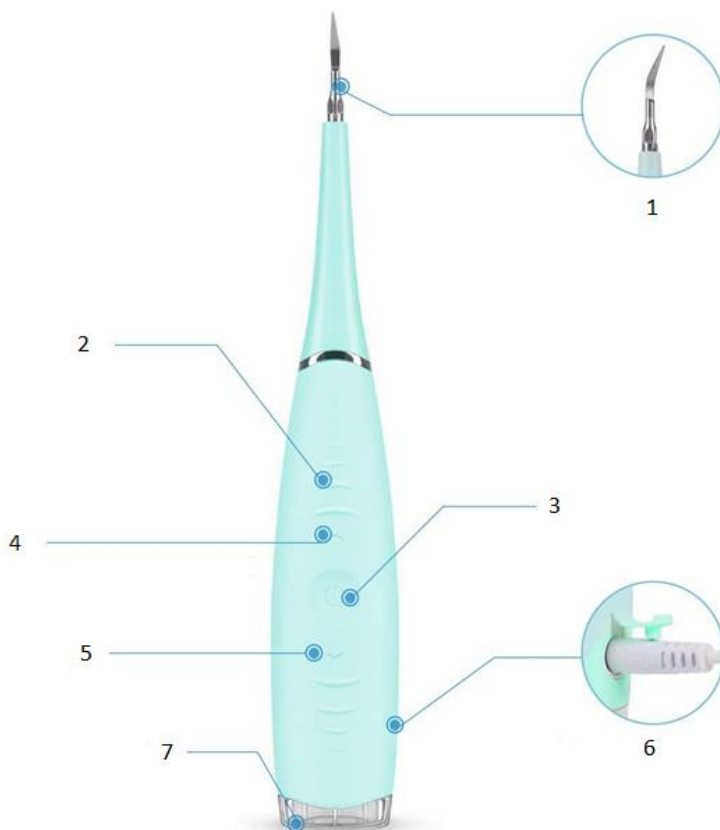

1. Čistiaca hlava	5. Zníženie frekvencie
2. Protišmykový pásik	6. Vstup na USB kábel
3. Vypínač	7. Indikátor nabíjania
4. Zvýšenie frekvencie (spolu 5 stupňov nastaviteľných zhora dole)	

NABÍJANIE

Nabíjanie cez USB:

Bezpečný a rýchly spôsob nabíjania pomocou USB.

1. Vložte nabíjačku do zadnej časti čističa zubov, pripojte k zdroju elektriny a začnite nabíjať.
2. Indikátor nabíjania sa rozsvieti načerveno, čo znamená, že sa čistič začal nabíjať. Keď je zariadenie plne nabité, indikátor svieti nazeleno.



POZNÁMKA:

- Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny.
- Po začiatku nabíjacieho režimu sa čistič zubov prepne do vypnutého režimu (stroj nebude počas nabíjania fungovať).
- Po nabití produktu ho možno použiť asi 200-krát.

Ak nabíjate čistič zubov prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhší čas (dlhšie ako 3 mesiace), úplné nabitie si môže vyžadovať viac času.

- Odpojte nabitý čistič zubov od sieťového adaptéra a odpojte adaptér od elektrickej zásuvky. Po odpojení prístroja od sieťového adaptéra LED indikátor nabíjania zhasne.

Odporúčania na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie:

- Produkt nabíjajte pri izbovej teplote.
- Nenechávajte výrobok pripojený k zdroju elektrickej energie dlhšie, ako je potrebné na jeho nabitie.
- V ideálnom prípade skladujte produkt úplne nabitý.
- Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, nabite ho najmenej raz za 6 mesiacov.

NÁVOD NA OBSLUHU



Tento čistič funguje na princípe, ktorý premieňa elektrickú energiu na energiu ultrazvukových vibrácií.

Stlačením zapínacieho tlačidla zapnete zariadenie, upravte výkon pomocou horného a dolného nastavovacieho tlačidla a začnite čistiť časti, ktoré je potrebné vyčistiť.





Strana, na ktorej je hrot, sa aplikuje na zub tak, aby bol pohyb hrotu rovnobežný s povrchom zuba. Prvé 2 mm hrotu sú najefektívnejšie!

Normálne čistenie zriedka vyžaduje viac ako 50 % úrovne výkonu. Ťažko odstrániteľný povlak si však môže vyžadovať vyššie nastavenie výkonu.

Dbajte na to, aby sa počas čistenia udržiaval kontakt medzi hrotom a povrchom zuba. Hrotom neustále pohybujte zo strany na stranu a nechajte prístroj, aby urobil všetku prácu. Krátkymi a dlhšími ťahmi dosiahnite, aby bola vyčistená celá plocha každého zuba.

Hrot je zvyčajne namierený smerom ku krčku zuba.

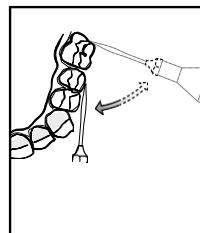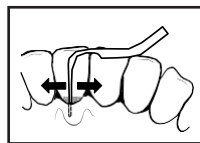

Aby hrot pracoval vždy rovnobežne s povrchom každého zuba, je dôležité dodržiavať anatómiu zuba.



Pri správnom nastavení výkonu, primeranom tlaku na zub (približne 20 gramov, ale nepresahujúcom 50) a pri hrote v polohe rovnobežnej s povrchom bude ošetrovanie jemné, tiché a efektívne.



UPOZORNENIE!

- Ak počas čistenia začujete škrípavý zvuk (hlasný a dôrazný), tlak na zub môže byť príliš nízky alebo je hrot nerovnobežný s povrchom zuba.
- Netlačte rukou prílišnou silou. Zubov sa vždy dotknite ľahkým stlačením.
- Buďte opatrní okolo citlivej línie ďasien.
- Pre niektorých používateľov môže byť prvé použitie trochu náročné, ale postupne sa čistič stane nevyhnutným nástrojom v starostlivosti o ústnu dutinu!
- Povlak a škrvna sú vo forme prášku. Preto si po použití vypláchnite ústa.
- Používajte ho, keď máte vnútro úst navlhčené.
- Ak sa počas používania stratí vlhkosť, vypláchnite si ústa.
- Ak sa používa na vnútornej strane zuba, použite zubné zrkadlo.

Po dokončení čistenia zubov;

- Dôkladne si vypláchnite ústa.
- Kovovú hlavu umyte pod čistou tečúcou vodou,
- Utrite zvyšok čističa zubov.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

